


AUGENLIDER

FALTEN

SCHWELLUNGEN UND
AUGENRINGE

AUGEN LIFTING Behandlung

Reduziert Zeichen der Alterung und der
Müdigkeit

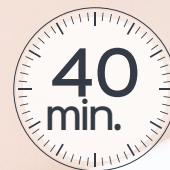

PRAKTISCHE ANLEITUNG

Augen Lifting

Behandlung



<p>SCHÖNHEITS BERATUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Führen Sie vor der Behandlung eine Schönheitsberatung für die Augenpartie durch. <p>EMPFEHLUNGEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergewissern Sie sich vor Beginn der Behandlung, dass die Kundin keine Kontaktlinsen trägt. - Sagen Sie der Kundin, dass sie während der gesamten Behandlung die Augen schließen soll. 	
<p>VORBEREITUNG DER HAUT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Entfernen Sie das Augenmake-up (insbesondere Mascara). ■ Lippen- und Gesichtsschminke entfernen. ■ Abtrocknen. 	
<p>1. AUGEN MASSAGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragen Sie AGE LOGIC EYE MASSAGE auf die Augenlider, unter die Augen, die Augenwinkel und die Stirn auf. ■ Folgen Sie den Bewegungen im Protokoll und führen Sie die Massage für 5 Minuten durch. Wiederholen Sie jede Bewegung viermal. ■ Lotion auftragen und trocknen. 	
<p>2. AUGENMUSKEL STIMULATION</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragen Sie eine dicke Schicht AGE LOGIC EYE GEL SERUM auf die Augenlider, unter die Augen, die Augenwinkel und die Stirn auf. ■ Bewegen Sie die Elektroden für 10 Minuten entsprechend der Bewegung im Protokoll. Wiederholen Sie jede Bewegung fünfmal. ■ Spülen, Lotion auftragen und trocknen. 	
<p>3. AUGENMASKE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragen Sie AGE LOGIC EYE MASK auf (siehe Anweisungen auf der Rückseite des Beutels). ■ 8 Minuten einwirken lassen. ■ Entfernen Sie die Maske und reiben Sie das überschüssige Serum mit leichter Effleurage um die Augenpartie ein. ■ Wenn nötig trocknen. 	
<p>NACH BEHANDLUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tragen Sie die Hautpflegeprodukte, die für die Schönheitsziele der Kundin am besten geeignet sind auf die Augenpartie und das Gesicht auf. ■ Begutachten und überprüfen Sie die Ergebnisse gemeinsam mit Ihrer Kundin vor einem Spiegel. 	
<p>BEAUTY MAKEOVER</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Machen Sie ein Beauty-Makeover mit den Produkten von Masters Color. 	
<p>VERORDNUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verschreiben Sie die Hautpflegeprodukte, die am besten zu den Schönheitszielen der Kundin passen. 	

1. EYE MASSAGE



Apply **Age Logic Eye Massage** to the eyelids, under the eyes, the corners of the eyes and the forehead.

Repeat each movement 4 times.

1



Frown lines

Upward fan-like movements between the eyes.

2



Forehead

Alternate horizontal smoothing movements with the flat of the hand.

3



Upper eyelids

Smoothing movements with the thumbs then apply pressure to the temples.

4



Twisting pressure to the left upper eyelids. Repeat to the right upper eyelids.

5



Smoothing movements with the thumbs then apply pressure to the temples.

6



Smoothing movements and pressure with all fingers.

7



Pressure and smoothing movements with all fingers.

Lower eyelids

8



Eye contour

Smoothing butterfly movements.

9



Toning tapping movements.

10



Forehead

Smoothing movements with fingers interlaced then apply pressure to the temples.

2. EYE MUSCLE STIMULATION

10
min

Apply a thick layer of **Age Logic Eye Gel Serum** to the eyelids, under the eyes, the corners of the eyes and the forehead.

Use the electrode balls for all movements.

Repeat each movement 5 times.

Start with the left eye contour.

Adjust the intensity of the stimulation depending on the client's sensitivity (default setting: 5).

1



2




Eye contour

1. Press the electrode onto the skin until it touches the muscle in the corners of the eyes. Move the other electrode back and forth on the eyelid with firm smoothing movements.
2. Repeat this movement under the eyes.

Press the electrode onto the skin until it touches the muscle in the corners of the eyes. Move the other electrode under the eyes, using firm smoothing movements towards the inner corner of the eyes, and circular smoothing movements along the bone in the eye contour, back to the corners of the eyes.

3

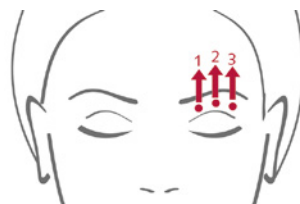

Forehead

1. Press the electrode onto the skin until it touches the brow muscle and move the other electrode to the upper forehead.
- 2 and 3. Repeat this movement towards the outer forehead in three steps.